



Eine passende Lösung

Die **FitLife** passt auch in besonders schwierigen Fällen, wenn andere Masken bereits an ihre Grenzen stoßen.

Die neuartige FitLife ist die ideale Vollgesichtsmaske für Patienten, denen herkömmliche Masken Unannehmlichkeiten verursachen oder die ungehinderte Sicht brauchen.

Gesichtshaar, Zahnprothesen, Verletzungen am Nasenrücken, Gesichtsunregelmäßigkeiten und Klaustrophobie können bei weiblichen wie bei männlichen Patienten die Wirksamkeit der Therapie beeinträchtigen oder erhebliche Unannehmlichkeiten verursachen. Mit der FitLife bekommen Sie diese Probleme in den Griff. Die Maske erreicht eine schnelle und stabile Dichtigkeit am weniger druckempfindlichen äußeren Rand des Gesichtes, ohne die Sicht einzuschränken. Mit den praktischen Schnappverschlüssen und dem speziell entwickelten Kopfband ist das Anlegen und Abnehmen denkbar einfach. Entscheiden Sie sich für die „große Lösung“. Keine Sondergrößen, keine Leckagen: Die FitLife passt!

PHILIPS

RESPIRONICS



Das FitLife Kopfband ist in den Größen Small und Large erhältlich.
EZ Peel-Laschen: Schnelles und einfaches Anlegen und Abnehmen des Kopfbandes.

Die Schnappverschlüsse sorgen für eine einfache Befestigung der Maske; eine Neueinstellung beim Wiederanlegen ist nicht nötig.

Das spezielle Polster ist in den Maskenrahmen integriert. Dadurch hat die Maske nur wenige Einzelteile.


Die Randabdichtung mit weichem Silikonpolster passt sich schnell und formgenau an und erreicht dadurch maximalen Tragekomfort.

Die großflächige Gesichtsabdeckung sorgt für eine gleichmäßige Druck- und Luftstromverteilung unter der Maske.

Das Sicherheitsventil schaltet auf Raumluft um, wenn der Druck unter 3 cm H₂O fällt.



Optional: Drehgelenk für freie Schlauchbewegung.

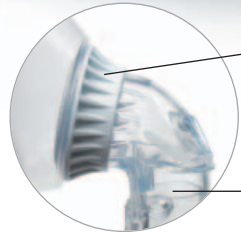

Radial angebrachte Luftauslassöffnungen leiten die Ausatemluft vom Bettpartner weg und begrenzen die Geräuschentwicklung.

Im Ventilbogen integrierter Druckmessanschluss für Druck-Erfassung und O₂-Zufuhr.

Artikel	
Vollgesichtsmaske FitLife	Artikelnummer
Maske Small mit Kopfband Small	1060803
Maske Large mit Kopfband Large	1060804
Maske Small mit Kopfband Small, ohne Ausatemöffnung	1061711
Maske Large mit Kopfband Large, ohne Ausatemöffnung	1061712
Teile und Zubehör	
FitLife Kopfband, Small	1060807
FitLife Kopfband, Large	1060808
Schnappverschlüsse (2 pro Packung) für FitLife Kopfband	1060913
FitLife Standard-Anschlussstück (SE)	1060810
Gekrümmtes Ausatemstück mit Ausatemventil	1060809
Optionales Drehgelenk	7041

Respironics, FitLife und EZ Peel sind Marken von Respironics, Inc. und verbundener Unternehmen.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen, und haftet nicht für Schäden aus der Nutzung dieser Publikation.

Broudy KB 8/12/09 MCI 4102444 PN 1063924

Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips Electronics

Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0
Respironics Europa, Mittlerer Osten, Afrika
+33 1 47 52 30 00
Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Kundendienst
+1 724 387 4000
800 345 6443
(toll free, US only)
www.philips.com/respironics
www.respironics.de