



JOYCEeasy

... ist die intelligente Wahl.
Nasal oder Full Face. Einfach Easy.

Von Grund auf neu: Sowohl ihre zierliche und gleichzeitig stabile Form, als auch die Befestigungs- und Einstellungs-elemente unsere Beatmungsmaske JOYCEeasy zielen auf einfachste Handhabung ab.

Intuitive einfache Handhabung

Neben der einfachen Maskeneinstellung direkt am Patienten sorgt besonders die intuitive Handhabung dafür, dass JOYCEeasy, egal ob als Nasal- oder Mund-Nasen-Maske, als leicht zu bedienende und komfortable Maske überzeugt.

Verbesserte Therapie-Compliance

Gleichzeitig verbessert JOYCEeasy die Therapie-Compliance und somit die Effektivität der Behandlung. Umfangreiche Produkttests sorgten dafür, dass wir die Maskenpassform noch weiter optimieren und das Auftreten von Leckagen oder Druckstellen auf ein Minimum reduzieren konnten.

Wohlfühlkomfort

Dazu trägt die WEINMANN-SilkTec-Beschichtung bei, mit der JOYCEeasy veredelt ist. Diese spezielle seidig-sanfte Oberfläche auf Maskenwulst und Stirnpolster vermittelt ein angenehmes Tragegefühl; besonders im Vergleich zu herkömmlichen Silikonprodukten.



JOYCEeasy
Mund-Nasen- und Nasal-Maske

Einfach zu bedienen


- Mit einer Hand auf- und abzusetzen
- Bänderungsclips mit leichtgängigem Clickraster **4**
- Verbesserte, noch einfachere Größenanpassung
- Klettungen sowie Außen- und Innenseiten der Bänderung sind farblich einfach zu unterscheiden **5**

Einfach komfortabel

- Mit WEINMANN SilkTec veredelte Stirnpolster und Maskenwulste erhöhen den Tragekomfort. **1**
- Das Kugelgelenk ermöglicht Patienten, sich in alle Richtungen zu bewegen. **6**
- Leises Ausatemsystem **7**
- Einstellbares Querband gegen Verrutschen **8**
- Großzügiger, weicher Nasenwurzelbereich **1**

Einfach gut aufgehoben

- Verbesserte Passform reduziert das Auftreten von Leckagen oder Druckstellen auf ein Minimum.
- Schlauchfixierband als optionale Fixiermöglichkeit des Geräteschlauches, wodurch sich die Hebelkräfte des Schlauches verringern
- Extrem robust durch Polyamid-Kunststoff
- Reißleine (nur Full Face) **9**

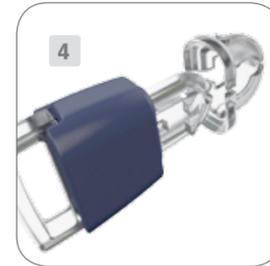


- 1 Maskenwulst
- 2 Stirnpolster
- 3 Einstellung Stirnstütze
- 4 Bänderungsclip
- 5 Klettungen
- 6 Kugelgelenk
- 7 Ausatemsystem
- 8 Querband
- 9 Reißleine (nur Full Face)
- 10 Druckmessanschluß



JOYCEeasy
Nasal-Maske



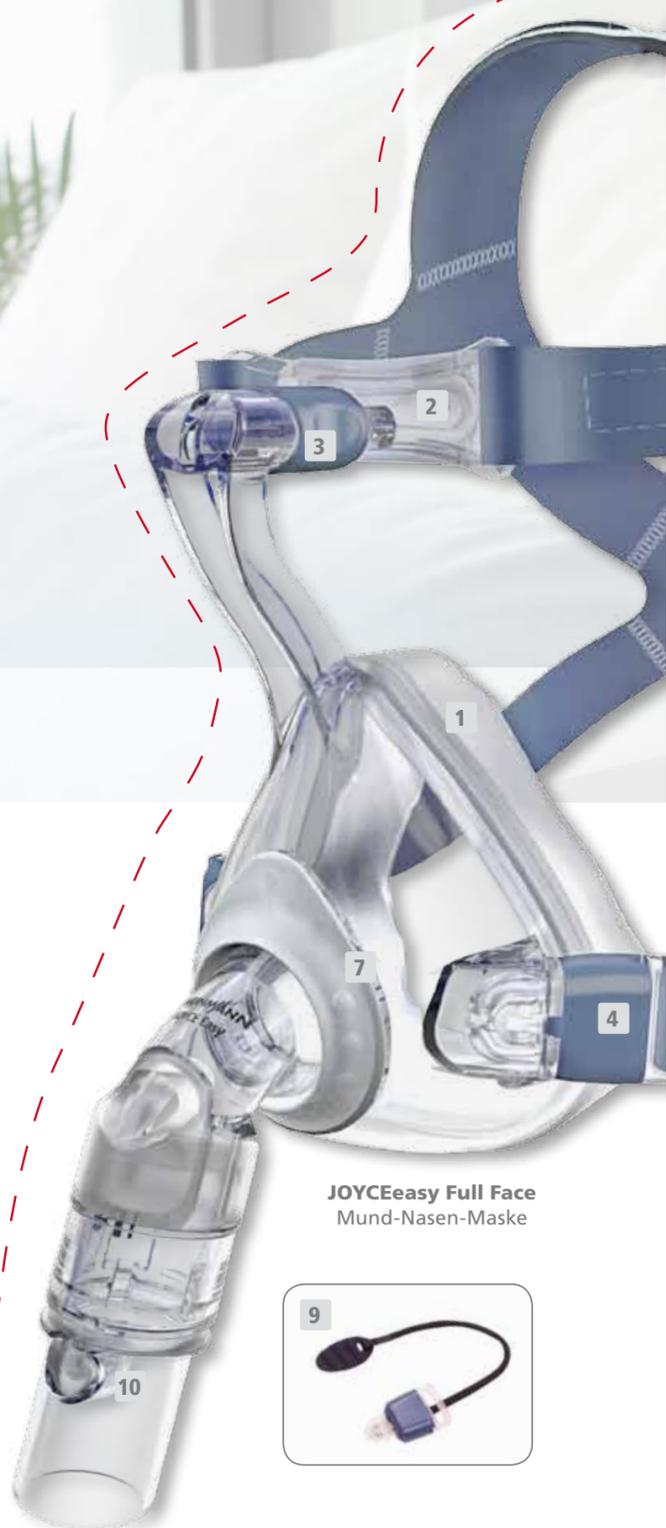


JOYCEeasy Full Face
Mund-Nasen-Maske

Full Face

Patient Interface / JOYCEeasy

Produktname	WM-Nr. Gr. S	WM-Nr. Gr. M	WM-Nr. Gr. L	HMV-Pos.-Nr.
JOYCEeasy Nasal	WM 25510	WM 25520	WM 25530	14.24.16.2045
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930	14.24.16.6039

Ersatzteile

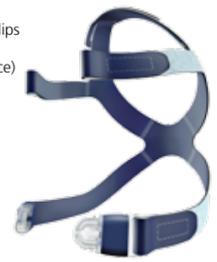Kopfbänderung inkl. Bänderungsclips WM 25505 (Nasal und Full Face) 	Stirnpolster Silikon, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 26801 (Nasal und Full Face) 	Verschluss Druckmessanschluss WM 26849 (Nasal und Full Face) 
Schlauchfixierband WM 26774 (Nasal und Full Face) 	Stirnstütze inkl. Stirnpolster Silikon, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 15797 (Nasal und Full Face) 	Drehhülse WM 26846 (Nasal) WM 26847 (Full Face) 
Bänderungsclips 2 Stück WM 26848 (Nasal und Full Face) 	Maskenwulst Silikon, Beschichtung WEINMANN SilkTec Gr. S WM 26803 (Nasal) WM 26853 (Full Face) Gr. M WM 26813 (Nasal) WM 26863 (Full Face) Gr. L WM 26823 (Nasal) WM 26873 (Full Face) 	Set Kugelgelenk vented Nasal Sicherungsring, Winkel, Drehhülse WM 15798 
Reißleine WM 26890 (Full Face) 	Set Kugelgelenk vented Full Face Sicherungsring, Winkel, Notfallausatemventil Drehhülse WM 15897 	Transportbeutel WM 26295 (Nasal und Full Face) 

Unser vollständiges Angebot an Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter: weinmann.de

Technische Daten JOYCEeasy

	Mund-Nasen-Maske		Nasal-Maske		Strömungswiderstand Notfallausatemventil
	Nasal-Maske	Mund-Nasen-Maske	Nasal-Maske	Mund-Nasen-Maske	
Produktklasse nach Richtlinie 93/42/EWG	II a				
Abmessungen (B x H x T)	ca. 80 x 130 x 90 mm ¹	ca. 120 x 150 x 110 mm ¹	-	-	Inspiration bei 50 l/min: 0,5 hPa Expiration bei 50 l/min: 0,5 hPa
Gewicht	ca. 72 g ¹	ca. 103 g ¹	-	-	Schalt- und Notfallschaltventil
Therapiedruckbereich	4 hPa bis 30 hPa				■ Öffnen: ≤ 1 hPa ■ Schließen: ≤ 2 hPa
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)				Angegebener Zweizahl-Geräuschemissionswert nach ISO 4871
Druckmessanschluss	Ø 4 mm				■ Schalldruckpegel: 18 dB(A) ■ Schalleistungspegel: 23 dB(A) ■ Unsicherheitsfaktor: 3 dB(A)
Temperaturbereich	+5° C bis +40° C -20° C bis +70° C				Gebrauchsdauer: bis zu 12 Monate ²
Strömungswiderstand	bei 50 l/min: 0,16 hPa bei 100 l/min: 0,64 hPa	bei 50 l/min: 0,13 hPa bei 100 l/min: 0,53 hPa			Angewandte Normen: EN ISO 17510-2:2009

¹ abhängig von Größe und Ausführung ² Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, Maskenteile früher zu ersetzen.

weinmann.de | weinmann.ch | weinmann-france.fr | weinmann.ru | weinmann.cn | weinmann.co.il

home care



JOYCEeasy

Genial einfach – einfach genial

83650-DE-02/2013 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinmann. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.