



¡Hecha para usted!



JOYCEone

JOYCEone

Su primera opción: ajuste perfecto en un instante

Los largos y costosos ajustes son cosa del pasado. Ahora le ofrecemos JOYCEone, la máscara ventilatoria con un solo tamaño que se ajusta a prácticamente todo el mundo. Es el resultado de décadas de experiencia con máscaras, y está disponible en dos variantes: nasal y oro-nasal.

Mano a mano: confort y éxito terapéutico

Por medio de la función de resorte flexible, el soporte frontal garantiza que la máscara se mantenga siempre estable a la distancia apropiada para la terapia y al mismo tiempo se apoye en la frente de forma confortable. La almohadilla de máscara unicapa es igualmente inteligente: por medio de su forma optimizada encuentra por sí misma la posición ideal, independientemente del tamaño de la nariz o la cara.

El diseño se manifiesta en los detalles

Sus pacientes adorarán JOYCEone desde el primer momento. Y es que JOYCEone no sólo convence por el ajuste perfecto y la comodidad, sino también por su fácil manejo: mediante el inconfundible código de colores de las cintas para la cabeza y los clips para cintas con retenes podrán ensamblar JOYCEone de forma rápida y correcta desde el principio.

Eficiencia moderna

En resumidas cuentas, el principio inteligente de JOYCEone le ayudará a aprovechar su tiempo de forma óptima sin necesidad de comprometer el tratamiento de los pacientes. JOYCEone – ¡Hecha para usted!

Las ventajas de JOYCEone

- Ahorra tiempo: ajuste automático del soporte frontal **3** y la almohadilla de la máscara. **1**
- Colocación inconfundible: claro código de colores de las cintas para la cabeza y los clips para las cintas. **4**
- Rentable: un solo tamaño se ajusta a todos los pacientes.
- Cómodo: limpieza sin esfuerzo.
- Agradable: sistema de espiración silencioso.
- Estable: materiales extremadamente robustos.


JOYCEone Nasal

Ajuste de la máscara a diferentes tamaños de nariz



JOYCEone Full Face

Ajuste de la máscara a diferentes tamaños de nariz y cara

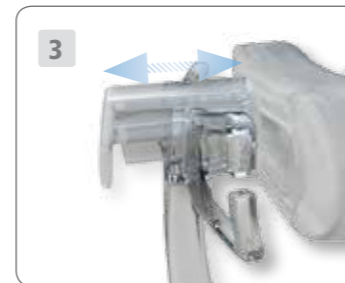

- 1 Almohadilla de máscara
- 2 Almohadilla de apoyo para el soporte frontal
- 3 Soporte frontal
- 4 Clip para cintas
- 5 Lengüetas de velcro
- 6 Conexión para medición de la presión
- 7 Cinta de remoción para rápido retiro (sólo JOYCEone Full Face)



JOYCEone Máscara nasal



JOYCEone

Nasal



JOYCEone Full Face
Máscara oro-nasal

Full Face

Piezas de repuesto



Cintas para la cabeza
incl. clips para cintas
WM 25255




Clips para cintas
2 piezas
WM 25257



Almohadilla de apoyo para el soporte frontal
Silicona
y revestimiento
WEINMANN SilkTec
WM 26801



SopORTE frontal
JOYCEone Nasal
incl. almohadilla de apoyo para el soporte frontal y revestimiento
WEINMANN SilkTec
WM 15907

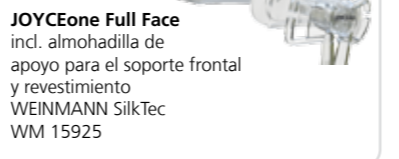


JOYCEone Full Face
incl. almohadilla de apoyo para el soporte frontal y revestimiento
WEINMANN SilkTec
WM 15925




Almohadilla de máscara

JOYCEone Nasal
Silicona
y revestimiento
WEINMANN SilkTec
WM 25253

JOYCEone Full Face
Silicona
y revestimiento
WEINMANN SilkTec
WM 25293

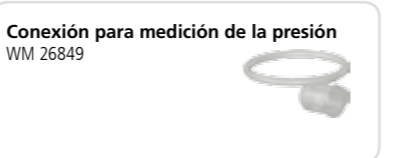

Conexión para medición de la presión
WM 26849

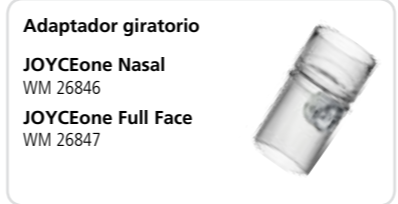

Adaptador giratorio
JOYCEone Nasal
WM 26846
JOYCEone Full Face
WM 26847



Juego de conexión esférica

JOYCEone Nasal
Anillo de fijación, codo, adaptador giratorio y cierre
WM 15908



JOYCEone Full Face
Anillo de fijación, codo, válvula antiáfxia, adaptador giratorio y cierre
WM 15944



Maletín de transporte
WM 26295

Puede consultar nuestra completa oferta de soluciones terapéuticas, accesorios y sistemas de máscara en: weinmann-medical.com

Datos técnicos

	JOYCEone Nasal	JOYCEone Full Face		JOYCEone Nasal	JOYCEone Full Face
Clase de producto según la Directiva 93/42/CEE	II a		Resistencia al flujo		
Dimensiones (an x al x pr)	aprox. 96 x 115 x 83 mm	aprox. 120 x 150 x 100 mm	a 50 l/min	0,05 cmH ₂ O	0,02 cmH ₂ O
Peso	87 g	100 g	a 100 l/min	0,28 cmH ₂ O	0,28 cmH ₂ O
Rango de presión terapéutica	4-30 cmH ₂ O		Resistencia al flujo	50 l/min ≤ 0,5 cmH ₂ O	
Conexión para tubo flexible	Ø 22 mm (macho)		Válvula antiáfxia	100 l/min ≤ 2,0 cmH ₂ O	
Conexión para medición de la presión	Ø 4 mm		Valor indicado de emisión de ruidos, dos cifras, según ISO 4871		
Rango de temperatura			■ Nivel de intensidad acústica:	15 dB(A)	
■ En uso:	de +5 °C a +40 °C		■ Nivel de potencia acústica:	23 dB(A)	
■ Almacenamiento:	de -20 °C a +70 °C		■ Factor de incertidumbre:	3 dB(A)	
			Tiempo de uso	hasta 12 meses ¹	

¹ Los materiales utilizados para la fabricación de máscaras envejecen si están expuestos, p. ej., a productos de limpieza corrosivos. Por lo tanto, en algún caso particular puede ser necesario sustituir piezas de la máscara en un tiempo menor al previsto.

Descripción del equipo	N.º WM
JOYCEone Nasal	WM 25260
JOYCEone Full Face	WM 25290

CE 0197



83099-MXES-09/2014 © Protegido por las leyes de propiedad intelectual. Reproducción de cualquier tipo solo con la autorización expresa de Weinmann. Todos los datos son sin garantía por motivos relacionados con la técnica de impresión.



¡Hecha para usted!



JOYCEone